



Máscara nasal

AirFit N30



Imágenes no contractuales

La mascarilla nasal AirFit™ N30 es excepcionalmente silenciosa y ligera, diseñada para quienes duermen de lado con un cojín nasal de doble pared que se adapta al movimiento. Su arnés QuickFit autoajustable proporciona estabilidad con mínimo contacto facial, y su ventilación QuietAir dispersa el aire suavemente para eliminar el ruido. Con un diseño minimalista de solo tres partes, es un 50% más ligera que versiones anteriores, ofreciendo comodidad y un campo de visión despejado. Disponible en 3 tamaños: pequeño, mediano y ancho, para adaptarse a una amplia gama de pacientes.


Descripción de producto	Referencia
Máscara facial.	AirFit N30

Especificaciones técnicas	
Presión de terapia	4-20 cm H ₂ O
Caída de presión medida.	50 a 100 l/min. 0.4 a 1.7 H ₂ O
Material almohadilla	Silicona
Tubo	Polipropileno
Conector	Policarbonato
Tallas	S / M

Certificado	
Certificado	ISO4871:1996,ISO3744:2010

Garantía	
Garantía	90 días.

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).

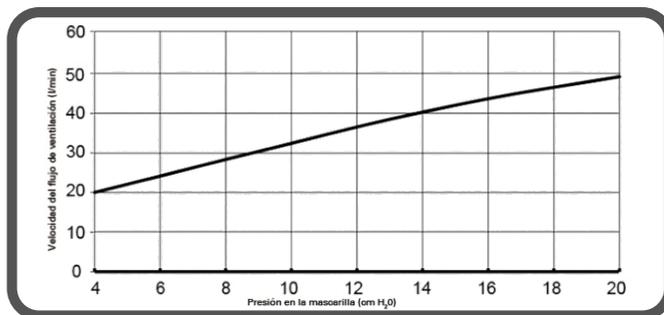

Curva de flujo/presión

La mascarilla cuenta con ventilación pasiva a modo de protección contra la reinspiración. Debido a variaciones en la fabricación, la velocidad de flujo de ventilación puede variar.




Limpieza de AirFit N30.

El mantenimiento de la mascarilla facial AirFit F30 es sencillo y se puede realizar a diario y semanalmente con facilidad. El mantenimiento diario implica desmontar la mascarilla y enjuagar los componentes con agua corriente, mientras que el mantenimiento semanal incluye una limpieza más profunda con detergente líquido suave, cepillado de las partes móviles y ventilación, y secado al aire, asegurando así la higiene y funcionalidad óptima del dispositivo.



Fijación rápida.

Su sencillo diseño favorece su rápida fijación.

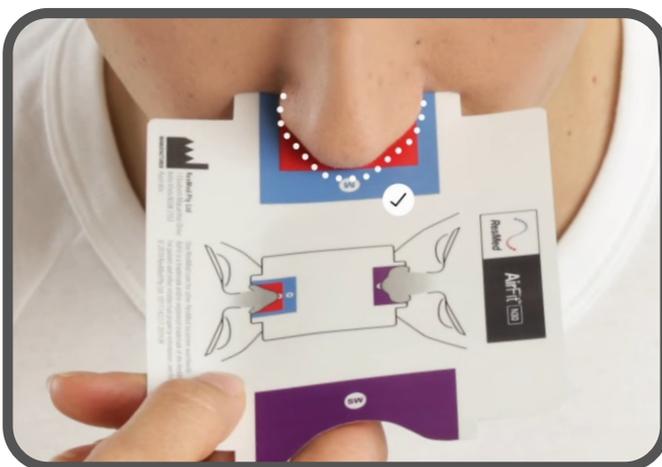

Selección de tamaño.

La opción de tamaño más cómodo será el que mejor se adapte a usted.



Mantenga los imanes de la mascarilla a una distancia segura de al menos 15 cm de los implantes o dispositivos médicos que puedan verse afectados negativamente por interferencias magnéticas. Esta advertencia es válida para el paciente o cualquier otra persona que esté en contacto físico cercano con su mascarilla. Los imanes se encuentran en el armazón y en los clips de las correas inferiores del arnés, con una fuerza del campo magnético de hasta 400 mT. Cuando se utiliza la mascarilla, se unen para sujetarla, aunque pueden desprenderse inadvertidamente mientras duerme. Los implantes/dispositivos médicos, incluidos los que se enumeran en las contraindicaciones, pueden verse afectados negativamente si se altera su funcionamiento debido a campos magnéticos externos (algunos implantes metálicos, como lentes de contacto con metal, implantes dentales, placas craneales metálicas, tornillos, cierres de craneotomías (trépano) y dispositivos de sustitución ósea).

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar
Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

360° IPSO MEDICAL
Pensando en las Personas