

**Máscara nasal****AirFit N20 Classic**

La mascarilla AirFit N20 Classic de Resmed ofrece un ajuste seguro y flexible para los pacientes que prefieren un diseño clásico. Con un refuerzo frontal y sin necesidad de imanes, es una excelente alternativa a la AirFit N20. Diseñada para proporcionar una comodidad inigualable y una estabilidad duradera, esta máscara incluye un cojín adaptable a la zona nasal, un sistema de ventilación que no perturba el sueño, y un soporte frontal que no causa dolor. Además, sus piezas son fáciles de colocar y quitar, lo que facilita su uso diario y asegura una experiencia de terapia CPAP efectiva, cómoda y sencilla de integrar en la rutina diaria.


Descripción de producto	Referencia
Máscara nasal.	AirFit N20 CLASSIC

Especificaciones técnicas	
Presión de terapia	4-30 cm H ₂ O
Caída de presión medida.	50 a 100 l/min. 0.4 a 1.5 H ₂ O
Material almohadilla	Silicona
Tubo	Polipropileno
Codo	Policarbonato
Tallas	S / M / L

Certificado	
Certificado	UE 1999/44/CE

Garantía	
Garantía	90 días.

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).

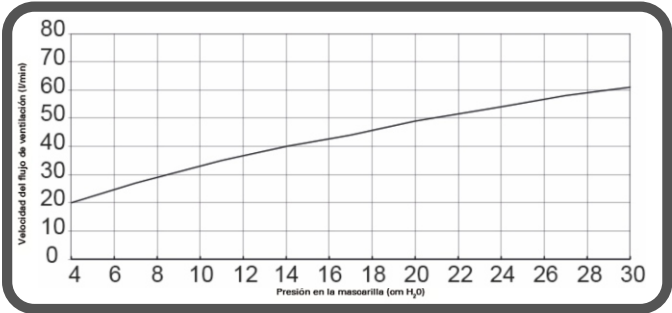

Curva de flujo/presión

La mascarilla cuenta con ventilación pasiva a modo de protección contra la reinspiración. Debido a variaciones en la fabricación, la velocidad de flujo de ventilación puede variar.



Limpieza de AirFit N20.

El mantenimiento de la mascarilla facial AirFit F20 es sencillo y se puede realizar a diario y semanalmente con facilidad. El mantenimiento diario implica desmontar la mascarilla y enjuagar los componentes con agua corriente, mientras que el mantenimiento semanal incluye una limpieza más profunda con detergente líquido suave, cepillado de las partes móviles y ventilación, y secado al aire, asegurando así la higiene y funcionalidad óptima del dispositivo.



Fijación rápida.

Su sencillo diseño favorece su rápida fijación.



Selección de tamaño.

La opción de tamaño más cómodo será el que mejor se adapte a usted.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

