



Máscara facial

AirFit F20 For Her



La mascarilla facial **AirFit F20 For Her** es un accesorio no invasivo, especialmente diseñado para la mujer, que canaliza el flujo de aire, con o sin oxígeno suplementario, desde un equipo de presión positiva en la vía aérea (PAP). Es adecuada para pacientes de más de 30 kg (66 lb) a quienes se les haya prescrito tratamiento con presión positiva. Esta mascarilla, parte de la gama AirFit 20 dedicada exclusivamente a las mujeres, ha sido diseñada para brindar una experiencia más personalizada, adaptándose a los rasgos faciales únicos de cada mujer y a su forma de dormir.

Concebida para ser utilizada repetidamente por un único paciente en su domicilio o para ser reutilizada en múltiples pacientes en entornos hospitalarios o institucionales, la AirFit F20 For Her combina comodidad y eficacia en el tratamiento de la apnea del sueño y otras condiciones respiratorias, ofreciendo una solución adaptada a las necesidades específicas de las mujeres.

Descripción de producto	Referencia
Máscara facial.	AirFit F20 For Her

Especificaciones técnicas	
Presión de terapia	3-40 cm H ₂ O
Válvula de seguridad abre	≤3 cm H ₂ O
Material almohadilla	Silicona
Tubo	Polipropileno
Codo	Polycarbonato
Tallas	S / M

Certificado	
Certificado	ISO 17510:2015

Garantía	
Garantía	90 días.

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).




Fijación rápida.

Su sencillo diseño favorece su rápida fijación.




Mantenga los imanes de la mascarilla a una distancia segura de al menos 15 cm de los implantes o dispositivos médicos que puedan verse afectados negativamente por interferencias magnéticas. Esta advertencia es válida para el paciente o cualquier otra persona que esté en contacto físico cercano con su mascarilla. Los imanes se encuentran en el armazón y en los clips de las correas inferiores del arnés, con una fuerza del campo magnético de hasta 400 mT. Cuando se utiliza la mascarilla, se unen para sujetarla, aunque pueden desprenderse inadvertidamente mientras duerme. Los implantes/dispositivos médicos, incluidos los que se enumeran en las contraindicaciones, pueden verse afectados negativamente si se altera su funcionamiento debido a campos magnéticos externos (algunos implantes metálicos, como lentes de contacto con metal, implantes dentales, placas craneales metálicas, tornillos, cierres de craneotomías (trépano) y dispositivos de sustitución ósea).

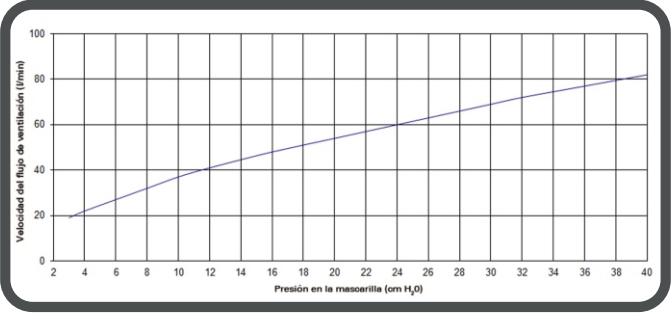


Curva de flujo/presión

La mascarilla cuenta con ventilación pasiva a modo de protección contra la reinspiración. Debido a variaciones en la fabricación, la velocidad de flujo de ventilación puede variar.

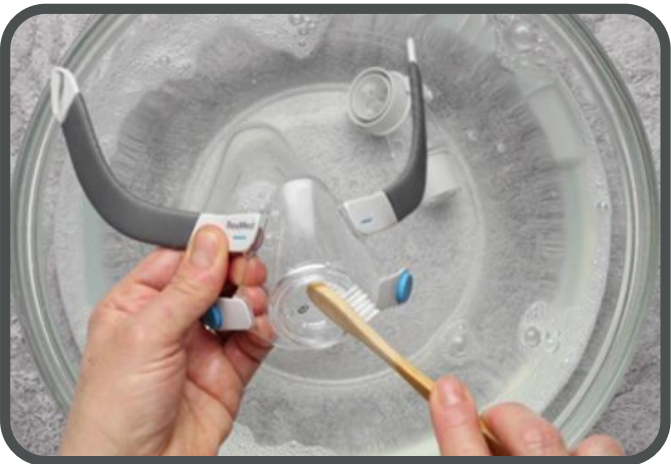

Limpeza de AirFit F20 For Her.

El mantenimiento de la mascarilla facial AirFit F20 For Her es sencillo y se puede realizar a diario y semanalmente con facilidad. El mantenimiento diario implica desmontar la mascarilla y enjuagar los componentes con agua corriente, mientras que el mantenimiento semanal incluye una limpieza más profunda con detergente líquido suave, cepillado de las partes móviles y ventilación, y secado al aire, asegurando así la higiene y funcionalidad óptima del dispositivo.

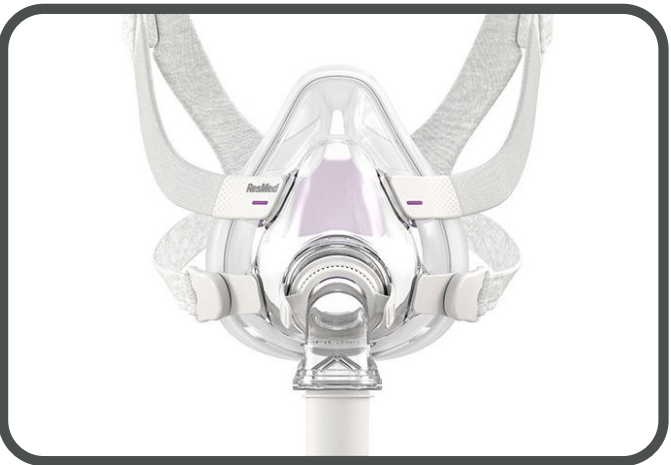

Válvula de seguridad.

La válvula de seguridad está diseñada para evitar la asfixia en caso de fallo de alimentación del CPAP.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

