



Máscara facial

AirFit F40



Imágenes no contractuales

La mascarilla facial **AirFit F40** de ResMed combina comodidad, diseño innovador y eficacia, ofreciendo una solución ideal para quienes necesitan terapia CPAP. Su tecnología avanzada, con **AdaptiSeal™** y **QuietAir™**, garantiza un sellado seguro, una reducción significativa del ruido y un ajuste personalizado, proporcionando una experiencia de sueño más tranquila y agradable. Además, su diseño **UltraCompact™** evita el puente nasal, minimizando irritaciones y marcas en la piel, mientras que los materiales suaves y duraderos aseguran comodidad durante toda la noche.

Fácil de usar y diseñada para quienes respiran por la boca, la **AirFit F40** ofrece un ajuste intuitivo gracias a su arnés ajustable y correas suaves. Su construcción ligera y minimalista permite un uso prolongado sin molestias, convirtiéndola en la elección perfecta para quienes buscan una mascarilla facial completa que priorice el descanso y la calidad en la terapia CPAP.

Descripción de producto	Referencia
Máscara facial.	AirFit F40
Especificaciones técnicas	
Presión de terapia	4-30 cm H ₂ O
Caída de presión medida	50 a 100 l/min. 0.4 a 1.7 H ₂ O
Resis. vál. antiasfixia	Ins. / esp. 50 l/min: 1,1 H ₂ O
Material almohadilla	Silicona
Tubo	Polipropileno
Codo	Polycarbonato
Tallas	S / M / L
Certificado	
Certificado	ISO 17510:2015
Garantía	
Garantía	90 días.

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (25 mm y 0,2 kg).




Fijación rápida.

Su sencillo diseño favorece su rápida fijación.



Mantenga los imanes de la mascarilla a una distancia segura de al menos 15 cm de los implantes o dispositivos médicos que puedan verse afectados negativamente por interferencias magnéticas. Esta advertencia es válida para el paciente o cualquier otra persona que esté en contacto físico cercano con su mascarilla. Los imanes se encuentran en el armazón y en los clips de las correas inferiores del arnés, con una fuerza del campo magnético de hasta 400 mT. Cuando se utiliza la mascarilla, se unen para sujetarla, aunque pueden desprenderse inadvertidamente mientras duerme. Los implantes/dispositivos médicos, incluidos los que se enumeran en las contraindicaciones, pueden verse afectados negativamente si se altera su funcionamiento debido a campos magnéticos externos (algunos implantes metálicos, como lentes de contacto con metal, implantes dentales, placas craneales metálicas, tornillos, cierres de craneotomías (trépano) y dispositivos de sustitución ósea).

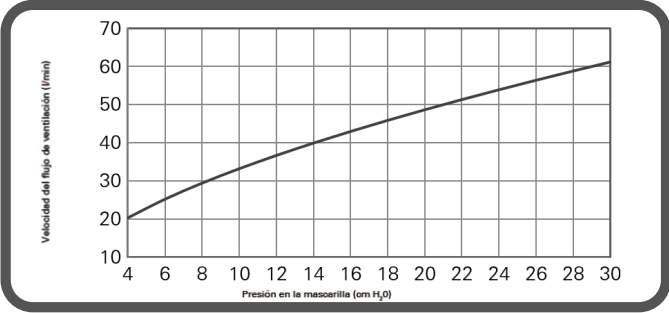

Curva de flujo/presión

La mascarilla cuenta con ventilación pasiva a modo de protección contra la reinspiración. Debido a variaciones en la fabricación, la velocidad de flujo de ventilación puede variar.



Limpieza de AirFit F40

El mantenimiento de la mascarilla facial AirFit F40 es sencillo y se puede realizar a diario y semanalmente con facilidad. El mantenimiento diario implica desmontar la mascarilla y enjuagar los componentes con agua corriente, mientras que el mantenimiento semanal incluye una limpieza más profunda con detergente líquido suave, cepillado de las partes móviles y ventilación, y secado al aire, asegurando así la higiene y funcionalidad óptima del dispositivo.



Compatible con cabello largo.

Perfecta para cabello recogido o suelto.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

