



Concentrador de oxígeno de 5 litros de DeVilbiss

Creado en base al legado de modelos de concentradores confiables y probados en el campo, los concentradores de oxígeno de 5 litros de DeVilbiss están diseñados teniendo en cuenta una mejor calidad, durabilidad, desempeño y simplicidad.

Ensamblados en los Estados Unidos, los concentradores de 5 litros DeVilbiss son sistemas de oxígeno robustos y de última generación que ofrecen el equilibrio adecuado de desempeño fresco y silencioso.

Gracias a su confiabilidad mejorada y a la reducción de los costos operativos, el concentrador de 5 litros es ideal para sus pacientes y la mejor inversión para su negocio.



Concentrador de oxígeno de 5 litros de DeVilbiss

Funciones de desempeño y diseño

- El exclusivo dispositivo de sensor de oxígeno OSD® de DeVilbiss, que viene de fábrica en todas las unidades, garantiza la confiabilidad y seguridad del paciente para intervalos de servicio más prolongados
- Controles de pacientes fácilmente accesibles, adaptador de cánula protegido y espacio empotrado para el humidificador para evitar daños
- Medidor de flujo con capacidad de bloqueo (medidor de flujo bajo disponible)
- Cubierta y asas laterales convenientes para fácil traslado
- Admite tubos de oxígeno de hasta 15,24 m (50 pies) y cánulas de hasta 2,14 m (7 pies)


continuación >

Funciones de desempeño y diseño (continuación)

- Diseño resistente para mayor duración
 - Unidad probada en temperatura y humedad elevadas durante largos períodos
 - Montaje, proceso de llenado y mezcla de tamices patentados
 - Diseño de válvula rotativa probado
 - Durabilidad excepcional del compresor
- Intervalo de tres años de servicio del distribuidor
- Puerto auxiliar de oxígeno

Características de seguridad

- Las alarmas que se alimentan del condensador no requieren batería, lo que disminuye la necesidad de servicio técnico y mantenimiento. Las alarmas indican:
 - Fallas de alimentación
 - Presión alta/baja
 - Oxígeno bajo
 - Mantenimiento requerido
- Medidor de flujo compensado a presión para garantizar el flujo preciso
- Válvula de alivio de presión y protección térmica en el compresor
- Cubierta retardante de llama
- Unidad de doble aislamiento con enchufe de dos patas

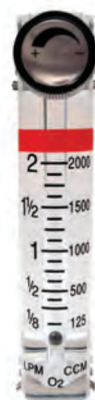

Medidor de flujo bajo
515LF-607

DeVilbiss 5 litros Serie Concentrador

Especificación	525DS
Presión de salida	8,5 psig (58,6 kPa)
Porcentaje de oxígeno	1–5 lpm=87-96%
Consumo de energía	Promedio de 310 vatios 275 vatios a 1,2 lpm y niveles menores
Peso	16,3 kg (36 libras)
Dimensiones	62,2 de alto x 34,2 de ancho x 30,4 cm de profundidad (24,5 pulg. x 13,5 pulg. x 12 pulg.)
Garantía	3 años limitado
Alarmas	Audible y visual. De presión alta/baja, flujo bajo, oxígeno bajo y fallas en la alimentación

Información para pedidos

525DS: Concentrador de oxígeno de 5 litros

525DS-Q: Concentrador de oxígeno ultra silencioso de 5 litros


Alquiler y venta de equipos
☎ 952 179 395 📞 652 770 957
www.ipsomedical.es

 **DeVilbiss**
HEALTHCARE

 **miENFERMERO.es**
conectados por tu salud
**Instalación profesional
solo por
enfermeros certificados.**