



Colchones Dinámicos DOMUS 1





Imágenes no contractuales

Domus 1 recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo (Escala Braden de 16 a 23 puntos) de aparición de úlceras por presión, como para el tratamiento de UPPs hasta grado I.

Cuenta con una terapia de presión alternante (las burbujas se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos) y regulador en función del peso del paciente.

Descripción de producto	Referencia
Colchón dinámico	DOMUS 1
Grado tisular	Grado I
Escala Branden	16 a 23 puntos.
Especificaciones técnicas colchón	
Alto x largo x ancho	6,4 x 198 x 86 cm.
Peso	2 Kg.
Peso máximo del paciente	100 Kg.
Terapia	Presión alternante.
Celdas de presion	130 burbujas.
Tiempo de alterne	9,6 minutos.
Solapas	1 metro de solapas.
Necesita colchón	Si.
Especificaciones técnicas compresor	
Alto x largo x ancho	9,5 x 23,7 x 11,2 cm.
Peso	1,4 Kg.
Peso máximo del paciente	100 Kg.
Rango de peso	40 a 100 Kg. regulable
Terapia	Presión alternante.
Tiempo de alterne	9,6 minutos.
Máxima salida de aire	4 litros por minuto.
Nivel sonoro	36 dBA
Voltaje	AC 230V, 50 Hz
Alarma	No.
Garantías / Normativa	
Garantía compresor	2 años.
Normativa compresor	Class II Tipo BF y Ip21
Garantía colchón	6 meses.
Normativa colchón	CA 117

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).

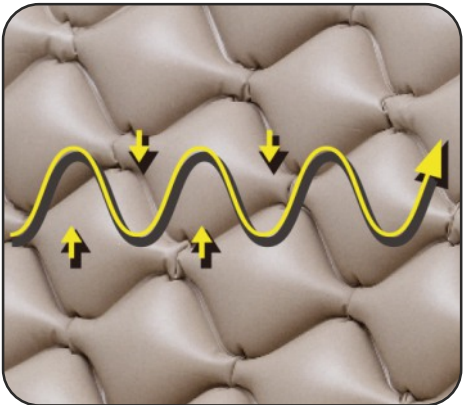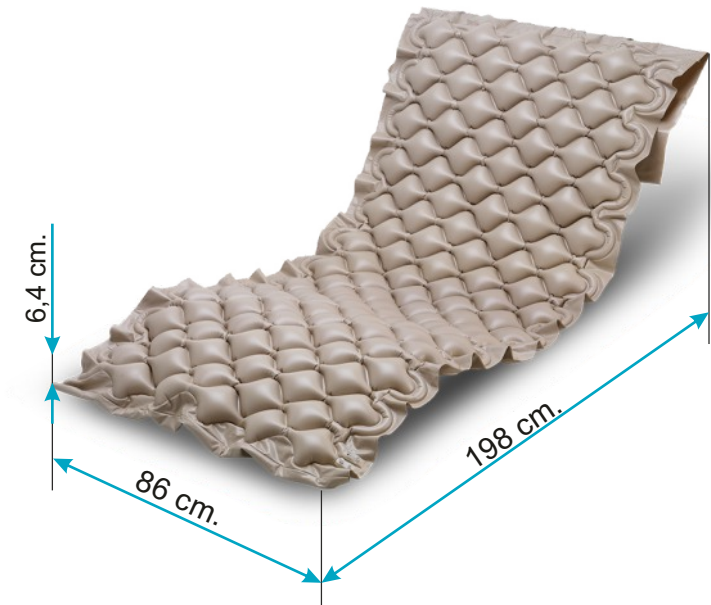

PVC sanitario



Regulador en función de peso.



Compresor fácil de colgar.

Sujeto a cambios técnicos

Comprometidos con su Salud y Bienestar

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévenez (Málaga)

