

Verso

Silla electrónica ligera,
plegable y configurable

Verso

Silla electrónica ligera,
plegable y configurable

Verso es una silla de ruedas electrónica versátil y ágil. Su diseño liviano la convierte en una silla de ruedas perfecta para usuarios en movimiento que deseen ampliar su movilidad sin comprometer la comodidad. Gracias a nuestra amplia experiencia en opciones, Verso ofrece al usuario una adaptabilidad notable. Diseñada fusionando la durabilidad de un chasis de silla de ruedas manual con las características avanzadas de unas ruedas traseras motorizadas, Verso es una opción perfecta para una silla de ruedas electrónica cómoda y liviana.

La batería de litio se puede extraer para cargarla externamente y facilitar su uso diario.

VERMEIREN
we care for you







CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



FÁCIL DE USAR

Simple, pero perfecta. Verso lo tiene todo. Desmonta tu silla de ruedas en unos segundos. Todas las piezas son fáciles de transportar y no demasiado pesadas para facilitar el transporte en automóvil.

El montaje es fácil con nuestro sistema Click&Drive. ¡No se necesitan herramientas, solo conecta la batería y estará listo para conducir! Gracias a nuestra batería extraíble, puedes cargar tu silla cuando y donde quieras.



Verso es compatible con el transporte aéreo!

Simplemente apaga la batería y tu silla de ruedas podrá volar. Consulta siempre el manual del usuario para conocer las instrucciones de transporte.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Una característica única de Verso es el bloque de motores y batería desmontable. Sepáralo de la silla de ruedas para permitir un fácil almacenamiento y transporte. Tanto el chasis como la “parte motorizada” de **Verso** tienen una rueda adicional para asegurarse de que ninguna pieza se dañe al soltarla. También permiten una fácil maniobrabilidad. El asiento se puede plegar fácilmente como lo harías con cualquiera de nuestras otras sillas de ruedas manuales. Perfecta para el transporte en el maletero del coche o para su almacenaje en tu hogar.



PESO LIGERO



16,2 kg

La parte
más pesada



9,9 kg

Pesode transporte
(sin cojín, reposapiés y reposabrazos)

Cuidamos de ti... y de tu espalda. Verso es una silla de ruedas eléctrica muy ligera con solo 16,2 kg para la parte motorizada y 9,9 kg de peso para el chasis.

Fácil de levantar sin esfuerzo.





EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN




Mando

El mando de P&G es justo como nos gusta en **VERMEIREN**, sin complicaciones.

Con indicador de estado de la batería, control de velocidad y un cómodo joystick, este mando es fácil de usar. La programación básica también es posible para personalizar su experiencia de conducción.

El mando es fácilmente separable al desmontarla **Verso**.

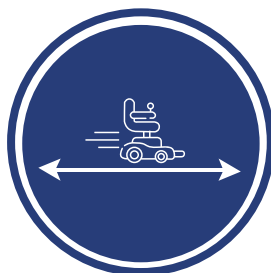

Hasta 21 km

Experimenta una autonomía de conducción ampliada con la batería de 17,5 Ah. Selecciona la batería que se adapte a tus necesidades.



6 km/h

Con una velocidad de 6km/h Verso te permite conducir a la velocidad perfecta para conversar y pasear con tus amigos y familia.



BATERÍAS - MOTORES

La batería de iones de litio (disponible en 12,8 Ah o 17,5 Ah) incorpora un indicador de estado de la batería y es liviana. Desbloquea fácilmente tu batería con tu propia llave antirrobo para cargarla donde quieras. ¿No tienes tiempo para cargar? Una batería adicional está disponible como opción.

La batería está convenientemente ubicada en la parte posterior de tu silla de ruedas para facilitar el acceso cuando necesites retirarla para cargarla o para verificar rápidamente el estado de la batería.

Con motores 2 x 250 W y llantas PU negras de 12", Verso compete con otras en su categoría. Una opción excelente y duradera para una silla de ruedas eléctrica para el uso diario.

Batería de iones de litio extraíble

12,8 Ah - 24 V
17,5 Ah - 24 V

2 motores de 250 W





CAUTION

• Store in cool and dry place
• Do not expose the product to fire, water or moisture

100% 50% 20% 0%

A close-up photograph of a black bicycle frame. A bright blue rectangular label with the word 'Verso' in black, stylized font is attached to the frame with two black screws. The background is blurred, showing other parts of the bike like the handlebars and wheels.

COLOR Y DISEÑO

Con un diseño elegante y detalles de colores llamativos, Verso se puede adaptar a tus preferencias mientras mantiene un aspecto moderno y atractivo. Los detalles de color tienen un doble propósito, ya que te permiten ubicar fácilmente las palancas de la parte motriz o las horquillas delanteras. Para mayor seguridad incluimos algunos reflectores.

COLORES

Los colores son una experiencia personal, como tu Verso. Elige la combinación de colores que mejor se adapte a tu estilo.

Elige el color del chasis entre blanco brillante y negro brillante y juega con los acentos de color para darle tu estilo.

Disponible acentos de color

• Verso •

azul claro brillante

• Verso •

verde claro brillante

• Verso •

naranja brillante

• Verso •

blanco brillante





ALTAMENTE CONFIGURABLE

Adapta tu Verso a ti. Verso es una silla altamente configurable que combina la amplia y extensa gama de opciones de **VERMEIREN** y nuestra experiencia en sillas de ruedas electrónica. ¡Elige lo que más te convenga!

DOS en UNO

CONVIERTE **VERSO** EN UNA SILLAMANUAL

KIT de ruedas 24"

Verso ofrece una opción bastante única para las personas que necesitan tanto una silla de ruedas manual como electrónica. Con nuestro kit de ruedas de 24" puedes cambiar fácilmente entre conducción manual o motorizada.

iConecta y conduce!



OPCIONES

Con una amplia gama de opciones, Verso es perfecta para satisfacer las necesidades del usuario y las necesidades del cuidador. Configura la silla según tus necesidades con nuestra amplia selección de opciones.



Para más opciones, consultar hoja de pedido.

INFORMACIÓN TÉCNICA

■ Ancho total	Ancho de asiento + 17cm
■ Longitud total	1078mm
■ Altura total	521mm
■ Ancho de asiento	440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Profundidad del asiento	420 a 480 mm
■ Altura del respaldo	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm

■ Baterías	12,8Ah - 24 V 17,5Ah - 24 V
■ Motores	2 x 250 W
■ Velocidad*	6 km/h
■ Rango de conducción*	15km 21km
■ Peso	31,3 kg
■ Peso máximo del usuario	130 kg

*Alcance y velocidad en condiciones ambientales óptimas y condiciones de batería determinadas de acuerdo con ISO 7176-4. * Las velocidades y el rango pueden variar (aprox.15%)

¡CUIDA TU SILLA ELÉCTRICA!

✗ No la mojes nunca.

El agua puede dañar los circuitos eléctricos y provocar fallos irreversibles. Límpiala con un paño seco o ligeramente húmedo, pero nunca la laves con agua directa.

⚠ Carga la batería correctamente.

Evita que la batería se descargue por completo y sigue las recomendaciones del fabricante. Usa solo el cargador original y conéctala a una toma segura.

⚡ Evita subir escalones o escaleras.

Las sillas eléctricas no están diseñadas para ello y podrías sufrir un accidente grave. Usa rampas adecuadas siempre que sea posible.

🔥 No la expongas a temperaturas extremas.

El calor excesivo puede dañar la batería y el frío extremo puede afectar su rendimiento. Guárdala en un lugar seco y con temperatura estable.

🔧 Revisa las ruedas periódicamente.

Mantén las ruedas limpias y revisa que no haya objetos atrapados que puedan afectar la movilidad o desgastarlas prematuramente.

🔧 Realiza mantenimiento regular.

Lleva tu silla a revisión técnica periódica para asegurarte de que todos los componentes funcionen correctamente y prevenir averías.

¡Recuerda! Una silla bien cuidada significa mayor seguridad, comodidad y autonomía para ti. ¡Dale el mantenimiento que merece!



Verso

Silla electrónica ligera,
plegable y configurable

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.



VERMEIREN
we care for you